

الاحتياجات

1. هذا المدلك هو جهاز موجه للصحة، وليس بديلاً عن العلاج الطبي، بالنسبة للمخاوف الصحية، استشر الطبيب.
2. لا ينصح به للنساء الحوامل أو الحائض، ولا للأطفال دون سن 6 سنوات. يجب استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عامًا تحت الإشراف.
3. قم بإزالة المجوهرات أو العناصر المماثلة قبل الاستخدام.
4. يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب أو الأمراض الحادة أو اضطرابات الجلد أو الأورام أو غيرها من الحالات الشاذة الجسدية الامتناع عن استخدام هذا الجهاز.
5. تجنب الاستخدام على المناطق المتضررة من الجراحة أو الإصابة أو التورم أو الالتهاب.
6. وللتأكيد، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي حالات صحية خطيرة مذكورة في النقطة 4 عدم استخدام المنتج.
7. يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو هشاشة العظام أو اضطرابات الأنسجة الرخوة أو السكتة الدماغية تجنب الاستخدام.
8. يجب على الأشخاص الذين يعانون من التسمم بالمعادن الثقيلة أو المرض العقلي أو ضعف الإدراك أن يستخدموه فقط بعد استشارة الطبيب.
9. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث عدم الراحة واستخدمه فقط تحت الإشراف المناسب.
10. تجنب وضع اليدين على رأس التدليك لمنع الإصابة.
11. لا تتعامل مع قابس الطاقة بأيدي مبللة لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
12. تجنب الاستخدام في درجات حرارة عالية أو بالقرب من اللهب المكشوف أو في الظروف شديدة الرطوبة.
13. لا تعمل بشكل مستمر لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
14. لا تستخدم أثناء العواصف الرعدية.
15. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك لتجنب المخاطر.
16. حافظ على جفاف الجهاز. انها ليست مقاومة للماء.
17. لا تغمر الجهاز في الماء.
18. لا تعرض لأشعة الشمس المباشرة.
19. هذا المنتج ليس للتشخيص الطبي أو العلاج أو أي استخدام تجاري.
20. توخي الحذر إذا كان لديك حساسية من المواد الموجودة في الجهاز.
21. توخي الحذر عند الشعور بالتوسع.
22. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرقبة أو بعد الجراحة استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل الاستخدام.

أين يمكنك استخدامه؟

هذا الجهاز سهل التشغيل ويمكن استخدامه على أجزاء مختلفة من الجسم.




استخدام الطريقة

1. الجهاز مزود بمؤقت لمدة 10 دقيقة وسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد هذه المدة.
2. لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ حتى يضيء المؤشر الأصفر. بالنسبة للوضع 1، اضغط برفق وسيتم تنشيط المؤشر الأحمر. اضغط مرة أخرى للوضع 2، وهكذا دواليك. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ حتى ينطفئ ضوء المؤشر، مما يشير إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

الشحن

1. لا تشتمل العبوة الأصلية على محول. استخدم شاحن USB الخاص بك.
2. بفضل تصميم USB العالمي، يمكنك شحن الجهاز باستخدام محول الهاتف المحمول أو محول السيارة أو مصدر الطاقة المحمول أو الكمبيوتر المحمول.

مخطط المنتج

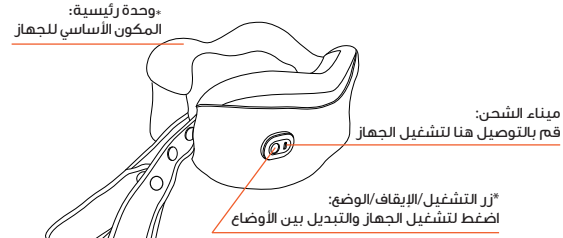

*للشحن، قم بتوصيل الجهاز بمحول USB الخاص بك.

كيفية إزالة غطاء القماش



1. قم بفك ضغط غطاء الجهاز.



2. اضغط بلطف لفصل غطاء القماش.

porodo | CHOOSE THE BEST

وسادة تدليك ثلاثية الأبعاد

SKU:PD-KMSPLW-GY



ماذا يوجد في الحزمة؟

العنصر	الكمية
وسادة تدليك ثلاثية الأبعاد	1
دليل المستخدم	1
كابل شحن USB	1

النصائح

1. حدد الاستخدام المستمر لهذا المنتج لمدة 30 دقيقة لتجنب الانزعاج.
2. تأكد من وضع رأس التدليك بشكل صحيح على جانبي الرقبة لمنع الألم.
3. إذا واجهت مقاومة وتوقف رأس التدليك لأكثر من 3 ثوانٍ، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز من أجل السلامة؛ أعد التشغيل بالضغط على المفتاح لمدة 3 ثوانٍ.
4. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، قم بشحن الجهاز كل 3 أشهر للحفاظ على صحة البطارية.

المعايير الفنية

اسم المنتج	وسادة تدليك ثلاثية الأبعاد
النموذج	PD-KMSPLW-GY
الحجم	260 x 130 x 235mm
التعبئة والتغليف	275 x 130 x 120mm
التركيب	80% Cotton, 20% Terylene
الملء	100% Memory Foam
الجهد الكهربائي	5V
القوة	3.5W
الجهد التشغيلي	3.7V
الوزن	547g
الشهادة	Verified and Qualified
المعايير	GB4706.1-2005/GB4706.10-2008
درجة حرارة التشغيل	+5°C to +40°C

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عيب	الأسباب المحتملة	حلول
الفشل في البدء	البطارية ضعيفة	اشحن وفقًا لذلك
غير قادر على شحن	مصدر طاقة معيب	استبدل المحول والكابل
قوة التدليك ضعيفة	البطارية ضعيفة	بطارية منخفضة تأكد من شحن الجهاز

الحماية

تخزين

إذا لم يتم استخدامه لأكثر من ثلاثة أشهر، فمفحص الجهاز وإعادة شحنه قبل الاستخدام. تأكد من أن الجهاز لا يميل على أي سطح وأنه مخزن في منطقة جيدة التهوية، ومحمي من أشعة الشمس المباشرة والغازات المسببة للتآكل.

فحص الطاقة

قبل الاستخدام، تأكد من أن جهد الإمداد يتوافق مع متطلبات الجهاز. لا تعمل إذا كان الجهد ليس ضمن النطاق المحدد.

صيانة

تنفيذ تدابير عزل الرطوبة والحماية من القوارض ومنع التلوث. قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف، وقلل تخزينه في مكان آمن بعد ذلك. لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز. يجب على الفنيين المؤهلين فقط إجراء أي إصلاحات أو تفكيك.

تصرف

تخلص من الجهاز وفقًا للوائح البيئية المحلية. لا تتخلص منها كفايات بلدية غير مصنفة.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net
موقع الكتروني: www.porodo.net
دعم الخدمة: support@porodo.net
انستقرام: porodo

porodo