

porodo | CHOOSE THE BEST

مدلك يدوي بالضغط الإبري ستة أوضاع

SKU:PD-APHNDMS-GY



قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.

(يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا بشكل آمن لاستخدامه في المستقبل.)
قم بشحن الجهاز عند الشراء باستخدام شاحن الهاتف الخلوي 5 فولت، 1 أمبير (أو 2 أمبير). سيومض مؤشر الطاقة أثناء الشحن وينطفئ بمجرد اكتمال الشحن، مما يشير إلى امتلاء البطارية.


مناسب لـ:

- الأفراد الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب لفترات طويلة.
- من يعانون من ضعف الدورة الدموية في الكف.
- النساء الراغبات في الحفاظ على جمال اليدين.

مواصفات المنتج

- تصميم مريح مصمم خصيصًا لنقاط الضغط الإبري اليدوية.
- تجرئة هوائية للتدليك.
- تدليك شامل بالوخز بالإبر لراحة اليد.
- وظيفة الحرارة للراحة في الظروف الباردة (اختياري).
- التدليك بالزلازل الدقيقة لتجربة محسنة (اختياري).

لوحة التحكم

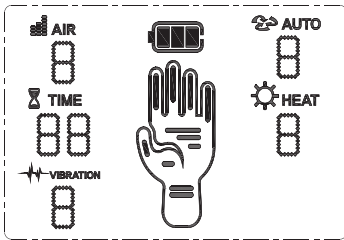

الصفات



ضغط هوائي

Auto
آلي




التدفئة



اهتزاز

- خاصية التدليك بضغط الهواء.
- برامج التدليك الآلي.
- خيار العلاج الحراري.
- خاصية التدليك بالاهتزاز.

العناصر

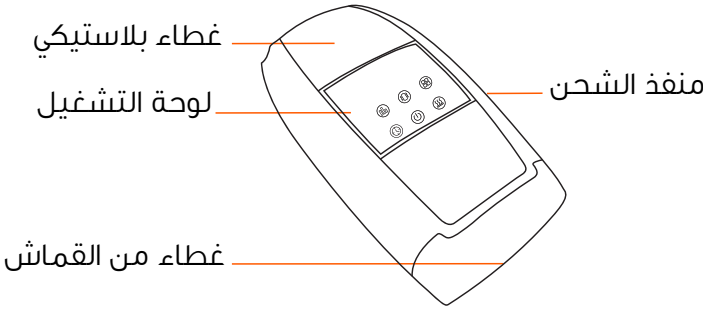

كيفية استخدام لوحة التحكم

زر الطاقة



- اضغط لمدة ثابنتين للتشغيل/الإيقاف.
- يعمل الجهاز لمدة ٥٥ دقيقة بشكل افتراضي.

زر الشدة



- لديه ٦ مستويات شدة، افتراضياً إلى المستوى 3 (L3).
- (L1, L2, L3, L4, L5, L6) (L1: الأدنى, L2: الأعلى)

كيفية استخدام لوحة التحكم

مفتاح الوضع



- يوفر 6 أوضاع للتدليك، بدءًا من الوضع (P1, P2, P3, P4, P5, P6)

زر الاهتزاز



- تبديل ميزة الاهتزاز مع وضعين متاحين.

مفتاح التدفئة



- ينشط وظيفة الحرارة، ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بعد 5 دقائق.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

1. إذا لم يبدأ تشغيل الجهاز، فتأكد من شحنه أو اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين.
2. تشمل الأصوات الطبيعية طنين مضخة الهواء ودق صمام الملف اللولبي، مما يشير إلى عدم وجود خطأ.

المواصفات

اسم المنتج	مدلك يدوي مع ستة أوضاع	القوة	5 واط
الطراز	PD-APHNDMS	وقت التشغيل	15 دقيقة
الجهد الكهربائي	تيار مستمر 3.7 فولت	الوزن	1.1 كجم